

TOMAS PARA CONSOLA PARA GASES MEDICINALES



CARACTERÍSTICAS

- Admite Chemetron/Allied®, Ohio Diamond, HillRom® Beacon Medaes, Puritan Bennett y adaptadores DISS
- Clavija de enganche (hembra) para PIN indexado para evitar el intercambio de servicios de gas
- Menos de 3 psi de caída de presión a través de la toma a 120 L/min y 50 psig de presión de entrada
- El tubo de entrada se puede girar 360 grados para facilitar la instalación.
- Los cuerpos posteriores para gas específico pueden aceptar cuerpos de identificación delantera ya sea Conexión rápida o DISS
- Las tomas se pueden ajustar hasta 19 mm (3/4") en el espesor de la placa de montaje.
- Hay disponibilidad de adaptadores Ohio Medical

ESPECIFICACIONES

Las Tomas de consola para gas medicinal son Ohio Medical Healthcair®, sus componentes son listados UL, cumplen con la norma NFPA, tratadas para el servicio de gas medicinal y probadas a presión. Cada Toma tiene menos de 3 psi de caída de presión a través de la toma a 120 L/min y 50 psig de presión de entrada. Las Tomas que proporcionan gas de presión positiva están equipadas con una válvula de retención primaria y secundaria, la válvula de retención secundaria está clasificada para 1,379 kPa (200 psi), lo que permite el retiro de la válvula primaria para realizarle servicio técnico sin aislar toda la zona.

Las Tomas de consola tienen un cuerpo posterior para gas específico que se adapta a una placa de hasta 19 mm (3/4 pulg). Cada cuerpo posterior está equipado con un tubo de cobre tipo "K" de 165 mm (6-1/2") de largo que está soldado al cuerpo de la toma. El diámetro externo del tubo de cobre es de 12.7 mm (1/2"). El tubo de entrada se puede girar en 360 grados para facilitar la instalación.


Los cuerpos posteriores de la toma son para gas específico por medio de un arreglo de pin indexado para gas específico. La indexación se pines está dispuesta de tal forma que el conjunto de válvula (latch-valve) sólo se pueda conectar con el cuerpo posterior para gas específico que coincida, lo que evita el intercambio de servicios de gas.

El conjunto de válvula, por medio de código de color y estilo, identifica el servicio de gas medicinal específico proporcionado por la toma y acepta adaptadores para gas específico.

Ohio Medical es una instalación registrada en ISO 13485.

TOMAS DE CONSOLA PARA GASES MEDICINALES

Se muestra DISS

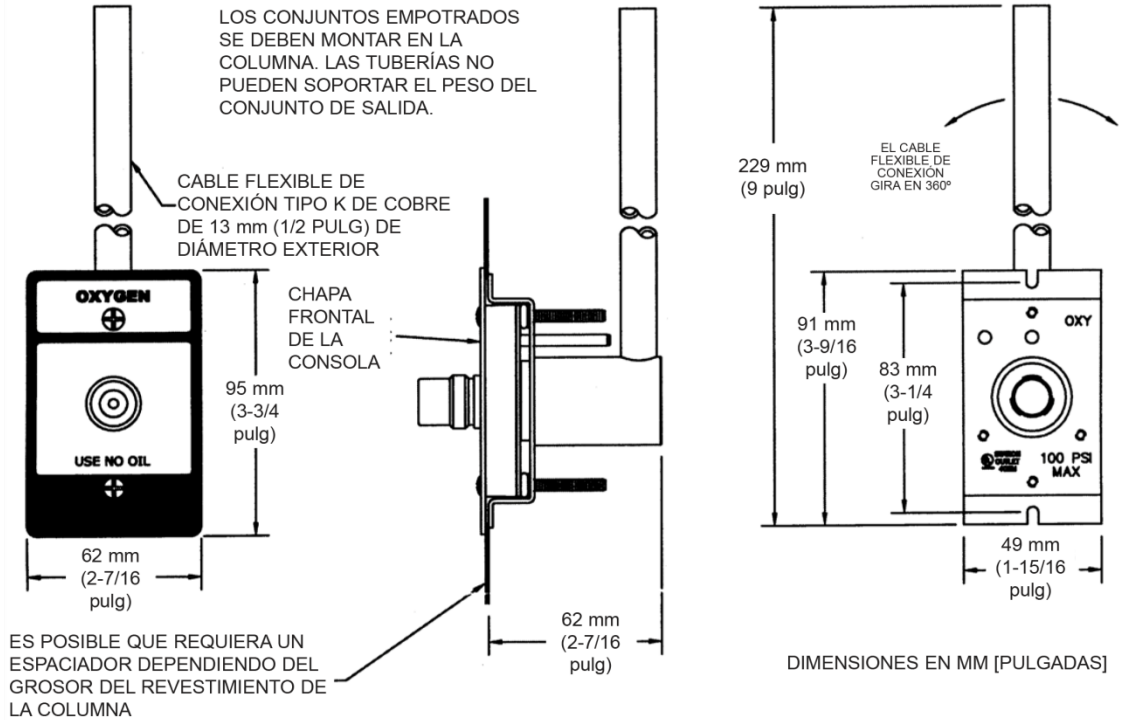

| DESCRIPCIÓN/ PRODUCTO | Consola DISS | Consola compatible con Diamond | Consola compatible con Chemetron | Consola compatible con Puritan Bennett |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Oxígeno | 261000-2 | 261010-2 | 261020-2 | 261040-2 |
| Vacío | 261000-6 | 261010-6 | 261020-6 | 261040-6 |
| Aire | 261000-14 | 261010-14 | 261020-14 | N/A |
| Óxido nitroso | 261000-10 | 261010-10 | 261020-10 | 261040-10 |
| Evacuación | 261000-22 | 261010-18 | 261020-18 | 261040-14 |
| Nitrógeno | 261000-18 | N/A | N/A | 261040-18 |
| Dióxido de carbono | 261000-26 | N/A | N/A | N/A |
| Pieza deslizable | 262760 | 262760 | 262760 | N/A |

